


FICHE PRODUIT

CorTTape®

SMALL
80/90

SYSTEME RÉGLABLE DE
FIXATION CORTICALE POUR
LA RECONSTRUCTION DE LIGAMENT
OU DE TENDON

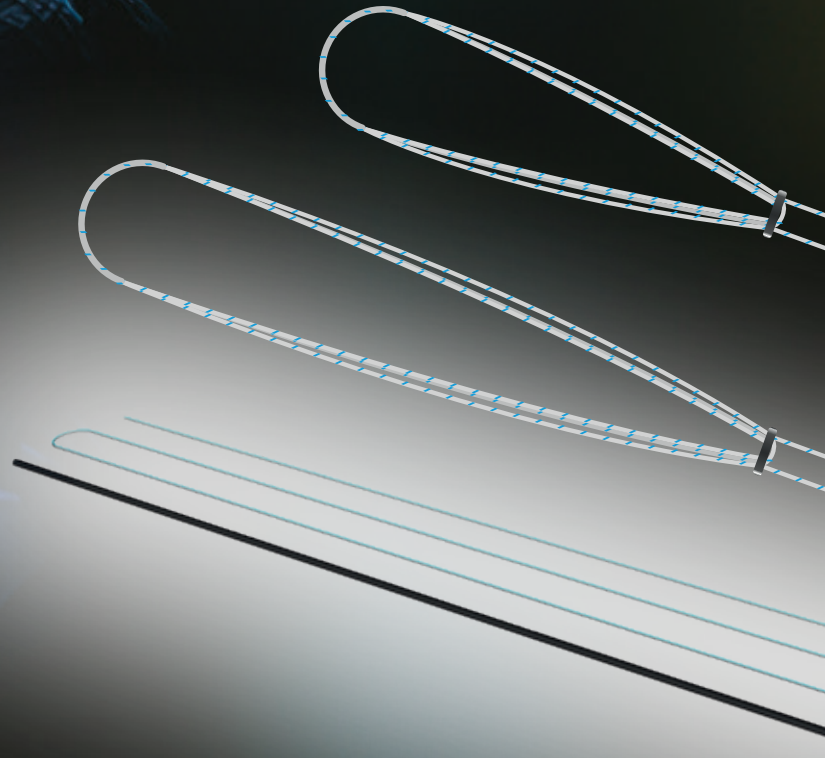

Caractéristiques du produit CorTTape® Small 80/90

- **Boucle auto-ajustable** de 15 à 90 mm.
- Haute résistance à la rupture (UHMWPE).
- **Conception de verrouillage à 3 points.** Construction tressée pour un placement facile et pour réduire le fluage des sutures.
- **Visibilité.** Motif croisé pour augmenter la visibilité de la boucle à l'intérieur du bouton en titane.
- **Emballage optimisé** pour réduire l'enroulement de la boucle et des fils de traction.

Indications

CorTTape® Small 80/90 est indiqué pour la fixation d'os ou de tissu mou dans des procédures orthopédiques nécessitant une reconstitution de ligament ou de tendon.

CorTTape® Small 90 et CorTTape Stick sont recommandés pour la réparation du LCA technique DT3 pédiculé.

Tests mécaniques du dispositif seul

Haute résistance à la traction : 900 N


CorTTape®

Small
60/90

SYSTEME RÉGLABLE DE
FIXATION CORTICALE POUR
LA RECONSTRUCTION DE LIGAMENT
OU DE TENDON

Conditionnement

CorTTape® Small 60/90 et CorTTape® Stick sont livrés dans un double sachet, stérilisés à l'oxyde d'éthylène. Ne pas re-stériliser.

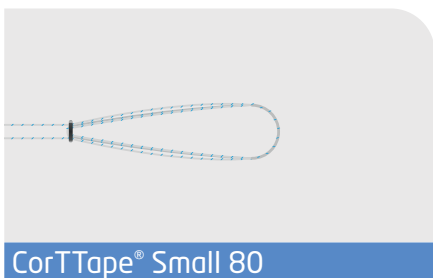


CorTTape® Small 80

- Longueur : 80 cm
- Deux tresses de réglage permettant d'ajuster la boucle bleue et blanche tressée en polymère non-résorbable (UHMWPE/ polyester)
- Réglage par l'extérieur (out/in)
- Une plaque en titane non revêtue (longueur 12 mm/largeur 4 mm/épaisseur : 1,5 mm/ Ti-6Al-4V ELI)
- Deux fils de traction (bleu et blanc) non-résorbables en polyéthylène de haut poids moléculaire (100% UHMWPE)

Réf. FH ORTHO : 271 227

Réf. fournisseur : OBAL-80-Ti

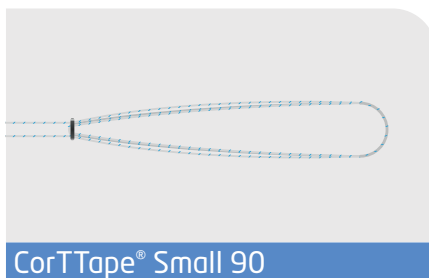


CorTTape® Small 90

- Longueur : 90 cm
- Deux tresses de réglage permettant d'ajuster la boucle bleue et blanche tressée en polymère non-résorbable (UHMWPE/ polyester)
- Réglage par l'extérieur (out/in)
- Une plaque en titane non revêtue (longueur 12 mm/largeur 4 mm/épaisseur : 1,5 mm/ Ti-6Al-4V ELI)
- Deux fils de traction (noir et vert) non-résorbables en polyéthylène de haut poids moléculaire (100% UHMWPE)

Réf. FH ORTHO : 271 639

Réf. fournisseur : OBAL-90-Ti

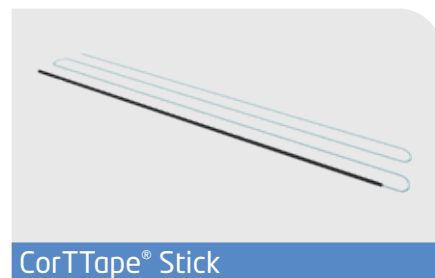

CorTTape® Stick

- Fil : Ø 0.50 (USP2)
- Longueur : 99 cm
- Couleur : bleu
- Tube noir 30 cm

Réf. FH ORTHO : 271 638

Réf. fournisseur : HS178

Date de modification document : novembre 2024 - Fabricant : Riverpoint - Gamme : Sport Surgery - Nom du produit : CorTTape SMALL - Destinataire : professionnels de santé - N° du marquage CE : CE0459 - Classe du DM : IIb - Remboursable par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site ameli.fr - Indications : Les systèmes de fixation corticale servent à la fixation des tendons et des ligaments pendant les procédures de reconstruction orthopédique, par exemple, celle de reconstruction des ligaments croisés antérieurs (LCA) - Recommandations d'utilisation : il est fortement conseillé de lire l'étiquette et la notice d'instructions du produit



DISTRIBUTEURS
DISTRIBUTORS

GRUPE
FH ORTHO™

FR, FH ORTHO SAS
3 rue de la Forêt - Zone Industrielle
BP 50009
68990 Heimsbrunn CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)3 89 81 90 92
Fax : +33 (0)3 89 81 80 11
info@fortho.com
www.fortho.com

USA, FH ORTHOPEDICS INC.
OrthoEx
7327 E Tierra Buena Lane
Scottsdale, Arizona 85260 - USA
Phone: +1 (412) 965-0950
customerservice@fortho-us.com
www.fortho.com

PL, FH ORTHO POLSKA
Ul. Garbary 95/A6,
61-757 Poznan - POLSKA
Phone: +48 61 863 81 27
Fax: +48 61 863 81 28
biuro@implants24.pl
www.fortho.com