


# EASY MOVE

## Prothèse Totale de Cheville

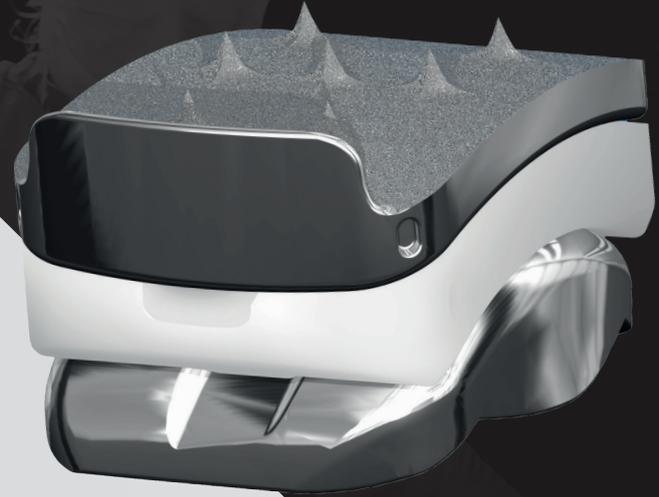

### CONCEPTION ANATOMIQUE

Prothèse totale de cheville à insert fixe

Conçue dans le but de se rapprocher de l'anatomie fonctionnelle de la cheville

Préservation du stock osseux, notamment du triangle de Volkmann, avec remplacement des seules résections osseuses

Résection tibiale anatomique courbe réalisée par un abord antérieur


Guide de coupe intra-articulaire pour déterminer les repères anatomiques et ajuster les différents paramètres de positionnement des implants

Recours limité à la fluoroscopie (uniquement pour les implants d'essai)

Revêtement de plasma-spray de titane pour une fixation sans ciment



- Implant talaire conique, plus large en partie antérieure qu'en partie postérieure
- Rayon de courbure médial plus petit que le rayon latéral
- Forme conique

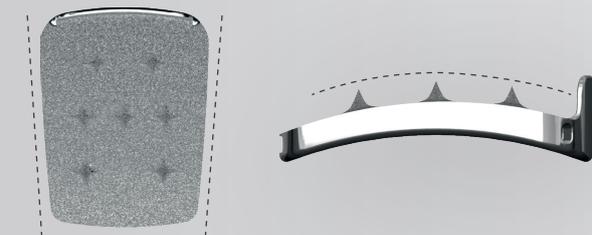

- Implant tibial plus large en partie antérieure qu'en partie postérieure
- Tibia anatomique courbe
- Dessin de l'implant tibial peu invasif : fixation dans le cortex distal grâce à des picots



# EASY MOVE

Prothèse Totale de Cheville

## Implants



INSERT EN PE (UHMWPE)		
TAILLE	REF. GAUCHE	REF. DROITE
T1 (4 mm)	269 797	269 832
T1 (6 mm)	269 799	269 834
T1 (8 mm)	269 801	269 836
T2 (4 mm)	269 802	269 837
T2 (6 mm)	269 804	269 839
T2 (8 mm)	269 806	269 841
T3 (4 mm)	269 807	269 842
T3 (6 mm)	269 809	269 844
T3 (8 mm)	269 811	269 846
T4 (4 mm)	269 812	269 847
T4 (6 mm)	269 814	269 849
T4 (8 mm)	269 816	269 851
T5 (4 mm)	269 817	269 852
T5 (6 mm)	269 819	269 854
T5 (8 mm)	269 821	269 856

IMPLANT TIBIAL (Ti6Al4V)	
TAILLE	REF.
Tibia T1	269 776
Tibia T2	269 777
Tibia T3	269 778
Tibia T4	269 779
Tibia T5	269 780



IMPLANT TALAIRE (CrCo)		
TAILLE	REF. GAUCHE	REF. DROITE
Talus T1	269 783	269 790
Talus T2	269 784	269 791
Talus T3	269 785	269 792
Talus T4	269 786	269 793
Talus T5	269 787	269 794

**Date de création document :** septembre 2023 - **Fabricant :** FH Industrie - **Gamme :** Pied - **Nom du produit :** EASY MOVE - **Destinataire :** professionnel de santé - **N° du marquage CE :** 0459 - **Classe du DM :** IIb - Non remboursé par les organismes d'assurance maladie - **Indications :** la prothèse totale de cheville est indiquée comme remplacement total de la cheville en chirurgie de première intention chez les patients présentant des articulations de la cheville endommagées par une arthrite rhumatoïde grave ou post-traumatique, ou une arthrose. Les composants sont destinés à un usage non cimenté. - **Recommandations d'utilisation :** il est fortement conseillé de lire l'étiquette et la notice d'instructions du produit - **N° du visa :** 2401FHOPM006



DISTRIBUTEURS  
DISTRIBUTORS



FABRICANT  
MANUFACTURER

GROUPE  
**FH ORTHO**

**FR, FH ORTHO SAS**  
3 rue de la Forêt - Zone Industrielle  
BP 50009  
68990 Heimsbrunn CEDEX - FRANCE  
Tél. +33 (0)3 89 81 90 92  
Fax : +33 (0)3 89 81 80 11  
info@fortho.com  
www.fortho.com

**USA, FH ORTHOPEDICS INC.**  
OrthoEx  
7327 E Tierra Buena Lane  
Scottsdale, Arizona 85260 - USA  
Phone: +1 (412) 965-0950  
customerservice@fortho-us.com  
www.fortho.com

**PL, FH ORTHO POLSKA**  
Ul. Garbary 95/A6,  
61-757 Poznan - POLSKA  
Phone: +48 61 863 81 27  
Fax: +48 61 863 81 28  
biuro@implants24.pl  
www.fortho.com

**FR, FH INDUSTRIE**  
6 rue Nobel, Z.I. de Kernevez  
29000 QUIMPER - FRANCE  
Tél. +33 (0)2 98 55 68 95  
Fax : +33 (0)2 98 53 42 13  
contact-fhi@fortho.com  
www.fortho.com