





FH LOOP  
FH LOOP TAPE

-----  
FH LINK  
FH TAPE

SUTURES NON RÉSORBABLES

FH LOOP / FH LOOP TAPE  
et FH LINK / FH TAPE sont des  
sutures non résorbables tressées  
en Polyéthylène à Haut Poids  
Moléculaire (UHMWPE) et enrobées  
uniformément d'adipate de  
polybutylène.

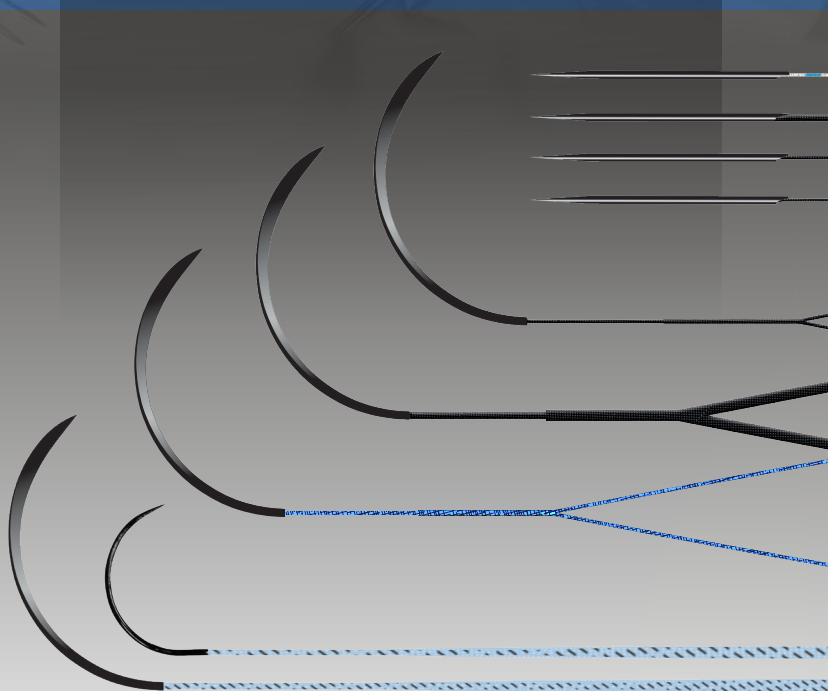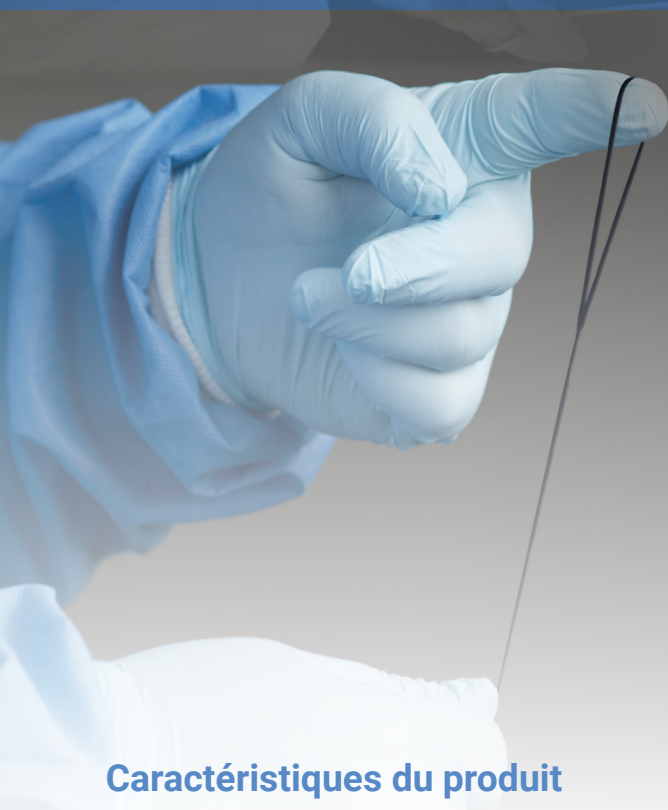

## Caractéristiques du produit

L'Acier Séries 300 qui compose les aiguilles améliore son pouvoir de pénétration, amène une plus grande résistance et permet une bonne ductilité pour réduire le risque de rupture.

Les sutures FH LOOP/FH LOOP TAPE et FH LINK/FH TAPE sont obtenues à partir d'un ensemble de filaments de fibres tressées les unes avec les autres pour une meilleure tenue des nœuds et une manipulation facilitée.


Nos sutures induisent un minimum de réactions inflammatoires des tissus mous, suivi de leur encapsulation graduelle dans le tissu conjonctif fibreux. Nos sutures sont non résorbables et il n'y a pas de changements significatifs dans la résistance à la traction, phénomène connu pour se produire in vivo.

## Indications

Les sutures FH LOOP/FH LOOP TAPE et FH LINK/FH TAPE sont indiquées pour la fixation d'os ou de tissu mou dans des procédures orthopédiques nécessitant une reconstruction de ligament ou de tendon. Elles sont donc adaptées plus particulièrement pour la préparation de greffes tendineuses, réparation des ligaments croisés antérieurs, réparation de la coiffe des rotateurs, réparation du tendon d'Achille et autres applications de ligature des tissus mous et d'ancrage.

## Conditionnement

Les sutures FH LOOP/FH LOOP TAPE et FH LINK/FH TAPE sont livrées stériles, stérilisées à l'oxyde d'éthylène. Les aiguilles noires permettent une meilleure visibilité et limitent les reflets. Ne pas re-stériliser.

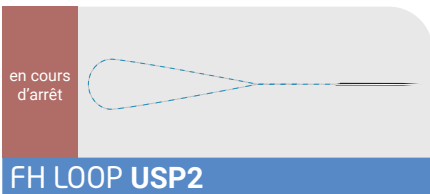


en cours d'arrêt

### FH LOOP USP2

- Fil : Ø 0.50 (USP2)
- Longueur : 60 cm (longueur de la boucle : 50 cm)
- Couleurs : bleu et blanc
- Aiguille en Acier Série 300 (Alliage Acier Inox) siliconée, droite (Straight Taper), Cobra Black (noire)

Réf. FH ORTHO : 271 197  
Réf. fournisseur : HS173

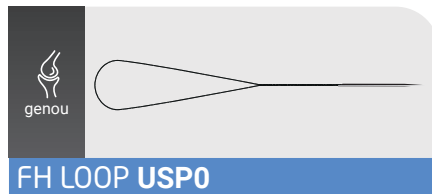


genou

### FH LOOP USPO

- Fil : Ø 0.35 (USP0)
- Longueur : 60 cm (longueur de la boucle : 50 cm)
- Couleur : noir
- Aiguille en Acier Série 300 (Alliage Acier Inox) siliconée, droite (Straight Taper) Cobra Black (noire)

Réf. FH ORTHO : 271 633  
Réf. fournisseur : HS345

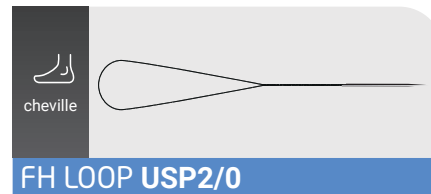


cheville

### FH LOOP USP2/0

- Fil : Ø 0.30 (USP2/0)
- Longueur : 60 cm (longueur de la boucle : 50 cm)
- Couleur : noir
- Aiguille en Acier Série 300 (Alliage Acier Inox) siliconée, droite (Straight Taper) Silver

Réf. FH ORTHO : 271 632  
Réf. fournisseur : HS343

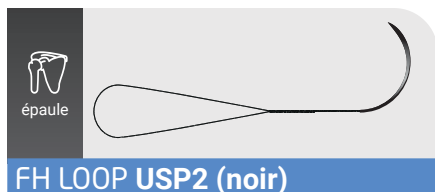


épaule

### FH LOOP USP2 (noir)

- Fil : Ø 0.50 (USP2)
- Longueur : 60 cm (longueur de la boucle : 50 cm)
- Couleur : noir
- Aiguille en Acier Série 300 (Alliage Acier Inox) siliconée, triangulaire noire 48 mm, courbure 1/2, Cobra Black (noire)

Réf. FH ORTHO : 271 635  
Réf. fournisseur : HS179

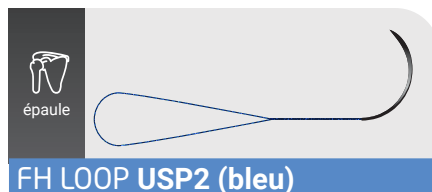


épaule

### FH LOOP USP2 (bleu)

- Fil : Ø 0.50 (USP2)
- Longueur : 60 cm (longueur de la boucle : 50 cm)
- Couleur : bleu
- Aiguille en Acier Série 300 (Alliage Acier Inox) siliconée, triangulaire noire 48 mm, courbure 1/2, Cobra Black (noire)

Réf. FH ORTHO : 271 200  
Réf. fournisseur : HS266

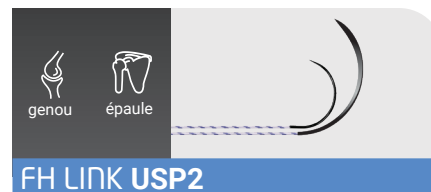

genou épaule

### FH LINK USP2

- Fil : Ø 0.50 (USP2)
- Longueur : 100 cm
- Couleurs : bleu et blanc
- 2 aiguilles Cobra Black (noires) en Acier Série 300 (Alliage Acier Inox) siliconée :
  - une aiguille triangulaire courbure 1/2, longueur 37 mm,
  - une aiguille ronde courbure 1/2, longueur 26 mm

Réf. FH ORTHO : 271 203  
Réf. fournisseur : HS168




genou cheville

### FH LOOP Tape 1.4 mm

- Bande : Largeur 1.4 mm
- Longueur : 60 cm (longueur de la boucle : 50 cm)
- Couleur : noir
- Aiguille en Acier Série 300 (Alliage Acier Inox) siliconée, droite (Straight Taper) Cobra Black (noire)

Réf. FH ORTHO : 271 631  
Réf. fournisseur : HS182

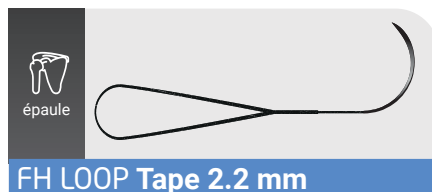


épaule

### FH LOOP Tape 2.2 mm

- Bande : largeur 2.2 mm
- Longueur : 60 cm (longueur de la boucle : 50 cm)
- Couleur : noir
- Aiguille en Acier Série 300 (Alliage Acier Inox) siliconée, triangulaire noire 48 mm, courbure 1/2, Cobra Black (noire)

Réf. FH ORTHO : 271 630  
Réf. fournisseur : HS523

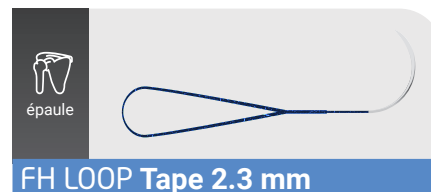


épaule

### FH LOOP Tape 2.3 mm

- Bande : largeur 2.3 mm
- Longueur : 70 cm (longueur de la boucle : 60 cm)
- Couleur : bleu
- Aiguille en Acier Série 300 (Alliage Acier Inox) siliconée, triangulaire 48 mm, courbure 1/2, Silver

Réf. FH ORTHO : 271 202  
Réf. fournisseur : HS519

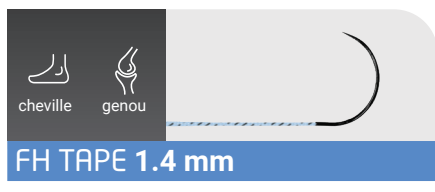


cheville genou

### FH TAPE 1.4 mm

- Bande : Largeur 1.4 mm
- Longueur : 100 cm
- Couleur : bleu et noir
- Aiguille en Acier Série 300 (Alliage Acier Inox) siliconée, ronde, courbure 1/2, Cobra Black (noire), longueur 26 mm

Réf. FH ORTHO : 271 637  
Réf. fournisseur : HS240

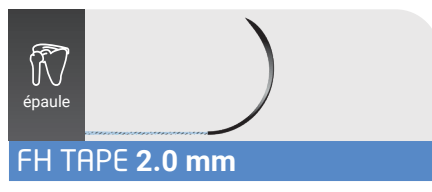

épaule

### FH TAPE 2.0 mm

- Bande : largeur 2 mm
- Longueur : 100 cm
- Couleur : bleu et noir
- Aiguille en Acier Série 300 (Alliage Acier Inox) siliconée, triangulaire noire 48 mm, courbure 1/2, Cobra Black (noire), longueur 37 mm

Réf. FH ORTHO : 271 636  
Réf. fournisseur : HS524

**Date de modification document : mars 2024 - Fabricant : Riverpoint - Gamme : Sport Surgery - Nom du produit : FH LOOP/FH LOOP TAPE - FH LINK/FH TAPE - Destinataire : professionnels de santé - N° du marquage CE : CE0459 - Classe du DM : IIb - Remboursable par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site ameli.fr - Indications : Les fils de suture sont indiqués pour le rapprochement des tissus mous en chirurgie générale, et/ou la ligature et l'utilisation d'allogreffons en chirurgie orthopédique, mais ne doivent pas être utilisés dans le cadre d'interventions cardiovasculaires. Elles sont conçues pour une utilisation unique et ne doivent pas être restérilisées. - Recommandations d'utilisation : il est fortement conseillé de lire l'étiquette et la notice d'instructions du produit**



DISTRIBUTEURS  
DISTRIBUTORS

GRUPE  
**FH ORTHO™**

**FR, FH ORTHO SAS**  
3 rue de la Forêt - Zone Industrielle  
BP 50009  
68990 Heimsbrunn CEDEX - FRANCE  
Tél. +33 (0)3 89 81 90 92  
Fax : +33 (0)3 89 81 80 11  
info@fortho.com  
www.fortho.com

**USA, FH ORTHOPEDICS INC.**  
OrthoEx  
7327 E Tierra Buena Lane  
Scottsdale, Arizona 85260 - USA  
Phone: +1 (412) 965-0950  
customerservice@fortho-us.com  
www.fortho.com

**PL, FH ORTHO POLSKA**  
Ul. Garbary 95/A6,  
61-757 Poznan - POLSKA  
Phone: +48 61 863 81 27  
Fax: +48 61 863 81 28  
biuro@implants24.pl  
www.fortho.com