





**FH LOOP
FH LOOP TAPE**

**FH LINK
FH TAPE**

SUTURES NON RÉSORBABLES

**FH LOOP / FH LOOP TAPE
et FH LINK / FH TAPE sont des
sutures non résorbables tressées
en Polyéthylène à Haut Poids
Moléculaire (UHMWPE) et enrobées
uniformément d'adipate de
polybutylène.**

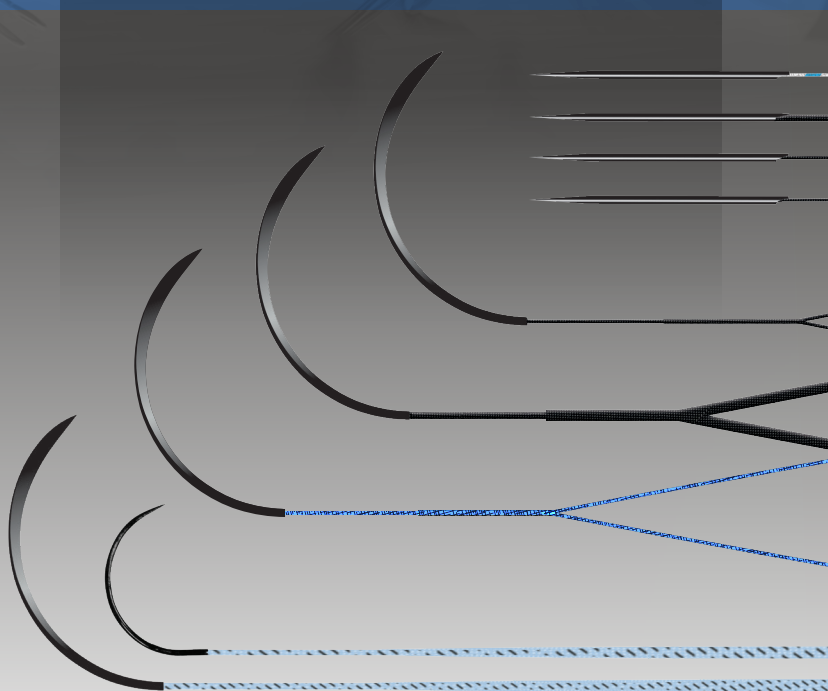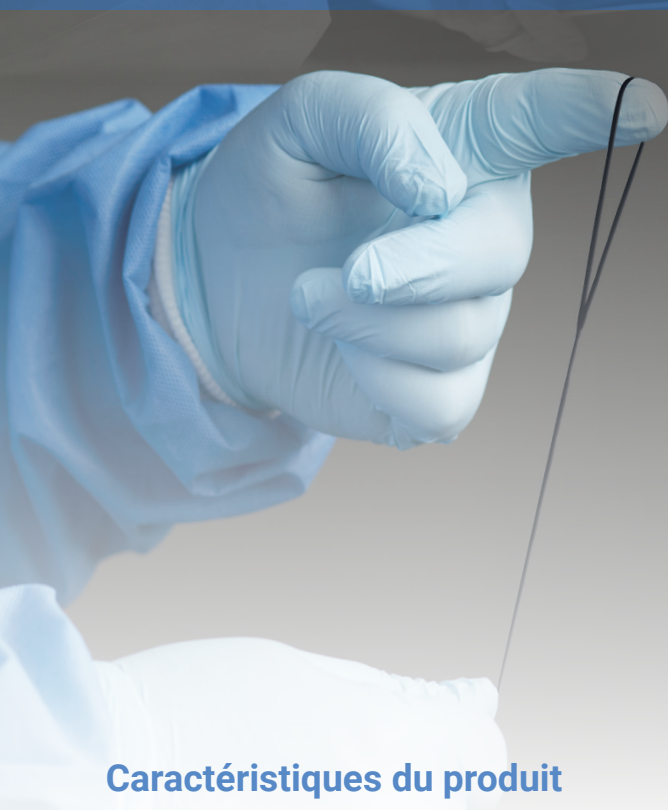

Caractéristiques du produit

L'Acier Séries 300 qui compose les aiguilles améliore son pouvoir de pénétration, amène une plus grande résistance et permet une bonne ductilité pour réduire le risque de rupture.

Les sutures FH LOOP/FH LOOP TAPE et FH LINK/FH TAPE sont obtenues à partir d'un ensemble de filaments de fibres tressées les unes avec les autres pour une meilleure tenue des nœuds et une manipulation facilitée.

Nos sutures induisent un minimum de réactions inflammatoires des tissus mous, suivi de leur encapsulation graduelle dans le tissu conjonctif fibreux. Nos sutures sont non résorbables et il n'y a pas de changements significatifs dans la résistance à la traction, phénomène connu pour se produire in vivo.


Indications

Les sutures FH LOOP/FH LOOP TAPE et FH LINK/FH TAPE sont indiquées pour la fixation d'os ou de tissu mou dans des procédures orthopédiques nécessitant une reconstruction de ligament ou de tendon. Elles sont donc adaptées plus particulièrement pour la préparation de greffes tendineuses, réparation des ligaments croisés antérieurs, réparation de la coiffe des rotateurs, réparation du tendon d'Achille et autres applications de ligature des tissus mous et d'ancrage.

Conditionnement

Les sutures FH LOOP/FH LOOP TAPE et FH LINK/FH TAPE sont livrées stériles, stérilisées à l'oxyde d'éthylène. Les aiguilles noires permettent une meilleure visibilité et limitent les reflets. Ne pas re-stériliser.


en cours
d'arrêt

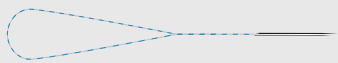

FH LOOP USP2

- Fil : Ø 0.50 (USP2)
- Longueur : 60 cm (longueur de la boucle : 50 cm)
- Couleurs : bleu et blanc
- Aiguille en Acier Série 300 (Alliage Acier Inox) siliconée, droite (Straight Taper), Cobra Black (noire)


Réf. FH ORTHO : 271 197
Réf. fournisseur : HS173

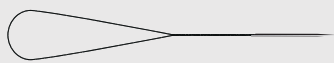

FH LOOP USPO

- Fil : Ø 0.35 (USP0)
- Longueur : 60 cm (longueur de la boucle : 50 cm)
- Couleur : noir
- Aiguille en Acier Série 300 (Alliage Acier Inox) siliconée, droite (Straight Taper) Cobra Black (noire)


Réf. FH ORTHO : 271 633
Réf. fournisseur : HS345

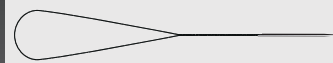

FH LOOP USP2/0

- Fil : Ø 0.30 (USP2/0)
- Longueur : 60 cm (longueur de la boucle : 50 cm)
- Couleur : noir
- Aiguille en Acier Série 300 (Alliage Acier Inox) siliconée, droite (Straight Taper) Silver


Réf. FH ORTHO : 271 632
Réf. fournisseur : HS343

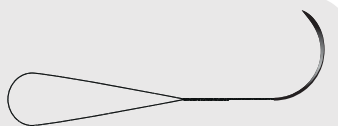

FH LOOP USP2 (noir)

- Fil : Ø 0.50 (USP2)
- Longueur : 60 cm (longueur de la boucle : 50 cm)
- Couleur : noir
- Aiguille en Acier Série 300 (Alliage Acier Inox) siliconée, triangulaire noire 48 mm, courbure 1/2, Cobra Black (noire)


Réf. FH ORTHO : 271 635
Réf. fournisseur : HS179

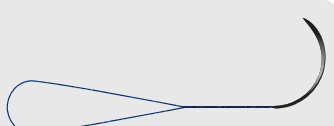

FH LOOP USP2 (bleu)

- Fil : Ø 0.50 (USP2)
- Longueur : 60 cm (longueur de la boucle : 50 cm)
- Couleur : bleu
- Aiguille en Acier Série 300 (Alliage Acier Inox) siliconée, triangulaire noire 48 mm, courbure 1/2, Cobra Black (noire)

Réf. FH ORTHO : 271 200
Réf. fournisseur : HS266

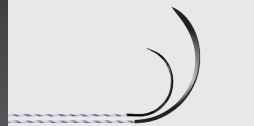

FH LINK USP2

- Fil : Ø 0.50 (USP2)
- Longueur : 100 cm
- Couleurs : bleu et blanc
- 2 aiguilles Cobra Black (noires) en Acier Série 300 (Alliage Acier Inox) siliconée :
 - une aiguille triangulaire courbure 1/2, longueur 37 mm,
 - une aiguille ronde courbure 1/2, longueur 26 mm

Réf. FH ORTHO : 271 203
Réf. fournisseur : HS168



FH LOOP Tape 1.4 mm

- Bande : Largeur 1.4 mm
- Longueur : 60 cm (longueur de la boucle : 50 cm)
- Couleur : noir
- Aiguille en Acier Série 300 (Alliage Acier Inox) siliconée, droite (Straight Taper) Cobra Black (noire)

Réf. FH ORTHO : 271 631
Réf. fournisseur : HS182



FH LOOP Tape 2 mm

- Bande : largeur 2 mm
- Longueur : 60 cm (longueur de la boucle : 50 cm)
- Couleur : noir
- Aiguille en Acier Série 300 (Alliage Acier Inox) siliconée, triangulaire noire 48 mm, courbure 1/2, Cobra Black (noire)


Réf. FH ORTHO : 271 630
Réf. fournisseur : HS523



FH LOOP Tape 2.3 mm

- Bande : largeur 2.3 mm
- Longueur : 70 cm (longueur de la boucle : 60 cm)
- Couleur : bleu
- Aiguille en Acier Série 300 (Alliage Acier Inox) siliconée, triangulaire 48 mm, courbure 1/2, Silver

Réf. FH ORTHO : 271 202
Réf. fournisseur : HS519

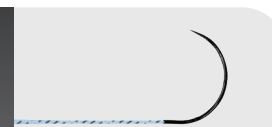

FH TAPE 1.4 mm

- Bande : Largeur 1.4 mm
- Longueur : 100 cm
- Couleur : bleu et noir
- Aiguille en Acier Série 300 (Alliage Acier Inox) siliconée, ronde, courbure 1/2, Cobra Black (noire), longueur 26 mm

Réf. FH ORTHO : 271 637
Réf. fournisseur : HS240



FH TAPE 2.0 mm

- Bande : largeur 2 mm
- Longueur : 100 cm
- Couleur : bleu et noir
- Aiguille en Acier Série 300 (Alliage Acier Inox) siliconée, triangulaire noire 48 mm, courbure 1/2, Cobra Black (noire), longueur 37 mm

Réf. FH ORTHO : 271 636
Réf. fournisseur : HS524

Date de modification document : mars 2024 - Fabricant : Riverpoint - Gamme : Sport Surgery - Nom du produit : FH LOOP/FH LOOP TAPE - FH LINK/FH TAPE - Destinataire : professionnels de santé - N° du marquage CE : CE0459 - Classe du DM : IIb - Remboursable par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site ameli.fr - Indications : Les fils de suture sont indiqués pour le rapprochement des tissus mous en chirurgie générale, et/ou la ligature et l'utilisation d'allogreffons en chirurgie orthopédique, mais ne doivent pas être utilisés dans le cadre d'interventions cardiovasculaires. Elles sont conçues pour une utilisation unique et ne doivent pas être restérilisées. - Recommandations d'utilisation : il est fortement conseillé de lire l'étiquette et la notice d'instructions du produit



DISTRIBUTEURS
DISTRIBUTORS

GRUPE
FH ORTHO

FR, FH ORTHO SAS
3 rue de la Forêt - Zone Industrielle
BP 50009
68990 Heimsbrunn CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)3 89 81 90 92
Fax : +33 (0)3 89 81 80 11
info@fortho.com
www.fortho.com

USA, FH ORTHOPEDICS INC.
OrthoEx
7327 E Tierra Buena Lane
Scottsdale, Arizona 85260 - USA
Phone: +1 (412) 965-0950
customerservice@fortho-us.com
www.fortho.com

PL, FH ORTHO POLSKA
Ul. Garbary 95/A6,
61-757 Poznan - POLSKA
Phone: +48 61 863 81 27
Fax: +48 61 863 81 28
biuro@implants24.pl
www.fortho.com