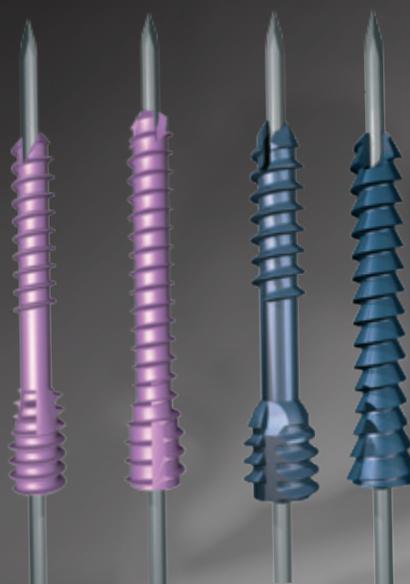


PIED

# CHIRURGIE DE L'AVANT-PIED

 *be* **POD**   

VIS AVANT-PIED  
3A ET PERCUTANÉE

GROUPE  
**FH** ORTHO™

# CONCEPT DE VIS AU MOTEUR POUR OSTÉOTOMIES DE L'AVANT-PIED

- Les vis **autoforeuses et autotaraudeuses** de la gamme bePOD permettent de fixer les ostéotomies métatarsiennes et phalangiennes, dans le but de réaliser une ostéosynthèse stable.
- Deux principes de vis canulée autoforeuse et autotaraudeuse sont proposés :
  - une **vis dite "3A"**, à pas différentiel, **Autocompressive, Autoforeuse et Autotaraudeuse**,
  - une **vis dite "percutanée"**, à filet continu, **Autoforeuse et Autotaraudeuse**.

## Ø2,5 MM

11 tailles : lg 10 mm à 30 mm

### VIS 3A

- AUTOCOMPRESSIVE - AUTOFREUSE - AUTOTARAUDEUSE

Vis canulée à pas différentiel autocompressive, autoforeuse et autotaraudeuse, avec guidage sécurisé sur broche permettant une compression sous contrôle.

**Indications :**  
Hallux valgus,  
Hallux rigidus.




### VIS PERCUTANÉE

- AUTOFREUSE - AUTOTARAUDEUSE


Vis canulée à pas continu, avec guidage sécurisé sur broche, autoforeuse et autotaraudeuse.

**Indications :**  
Hallux valgus,  
Hallux rigidus.

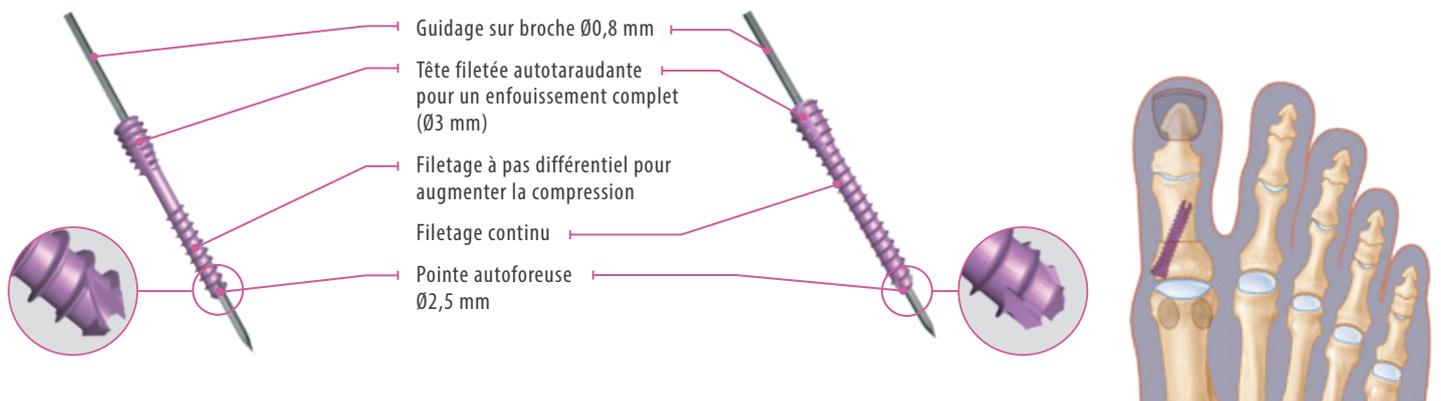

### MINI KIT BE POD Ø2,5

RÉF.	DÉSIGNATION
1 265 614	Broche D0,8 L80
2 264 257	Broche D0,8 L130
3 265 788	Tournevis indicateur mesure D0,8 L80
4 264 253	Tournevis moteur T7 Torx D0,8
5 265 613	Indicateur de mesure universel 80/130 mm
6 265 615	Foret vis D2,5
7 266 492	Tournevis ablation T7 Torx
8 264 585	Panier mini kit 3A ou percut D2,5

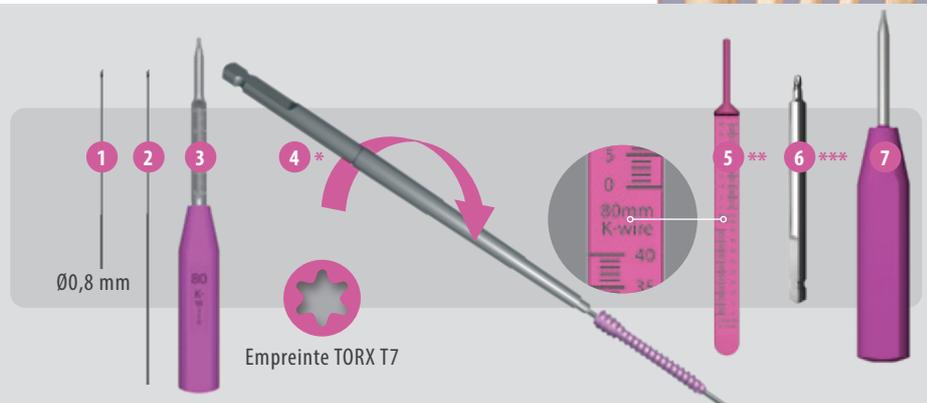

\* Si le tournevis moteur se désengage en cours de vissage, il est recommandé de finaliser le vissage avec le tournevis à main (réf. 265 788)

\*\* Contrôler la longueur de la broche utilisée (80 ou 130mm) avec l'indicateur de mesure universel

\*\*\* Il est recommandé de préparer l'introduction de la tête de la vis à l'aide du foret, notamment si une insertion au moteur de la vis est souhaitée.

- Les mêmes vis sont utilisées pour fixer les ostéotomies phalangiennes et métatarsiennes.
- Conçues en alliage de titane (TA6V), ces vis sont biocompatibles.
- L'anodisation des vis est un facteur d'aide à la mise en place et facilite l'éventuelle ablation du matériel.
- Les vis sont délivrées sous emballage stérile et unitaire, permettant de répondre aux normes les plus rigoureuses de traçabilité.
- Elles sont disponibles en deux diamètres : Ø 2,5 mm et Ø 3 mm.

## Ø3 MM

13 tailles : lg 10 mm à 34 mm

### VIS 3A

- AUTOCOMPRESSIVE - AUTOFOREUSE - AUTOTARAUEUSE

Vis canulée à pas différentiel autocompulsive, autoforeuse et autotaraueuse, avec guidage sécurisé sur broche permettant une compression sous contrôle.

#### Indications :

Hallux valgus,  
Hallux rigidus.




### VIS PERCUTANÉE

- AUTOFOREUSE - AUTOTARAUEUSE

Vis canulée à pas continu, avec guidage sécurisé sur broche, autoforeuse et autotaraueuse.


#### Indications :

Hallux valgus,  
Hallux rigidus.

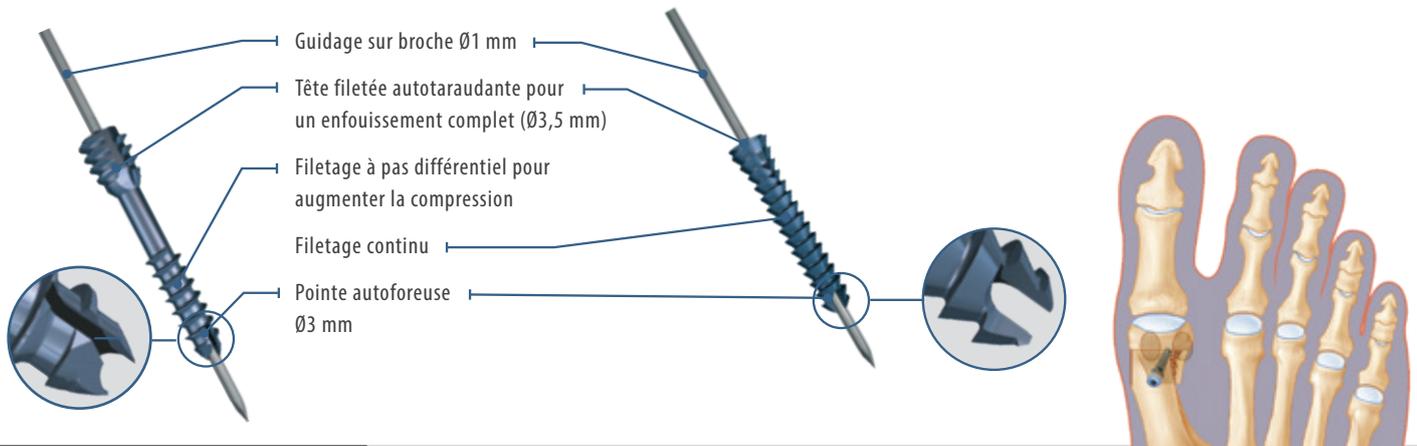

### MINI KIT BE POD Ø3

RÉF.	DÉSIGNATION
1 254 920	Broche D1 L130
2 256 213	Tournevis indicateur canulé D3
3 256 446	Tournevis moteur D3
4 257 408	Panier mini kit 3A ou percutané D3

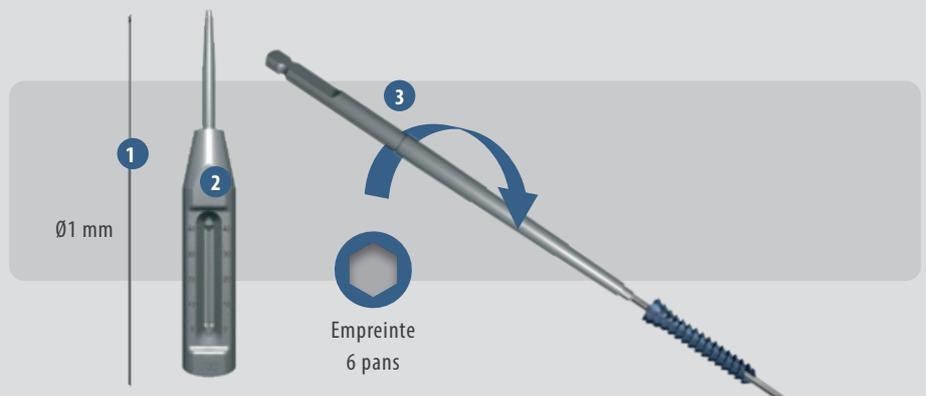



VIS 3A Ø2,5	
RÉF.	DÉSIGNATION
264 229	Vis bePOD 3A canulée lg 10 mm
264 230	Vis bePOD 3A canulée lg 12 mm
264 231	Vis bePOD 3A canulée lg 14 mm
264 232	Vis bePOD 3A canulée lg 16 mm
264 233	Vis bePOD 3A canulée lg 18 mm
264 234	Vis bePOD 3A canulée lg 20 mm
264 235	Vis bePOD 3A canulée lg 22 mm
264 236	Vis bePOD 3A canulée lg 24 mm
264 237	Vis bePOD 3A canulée lg 26 mm
264 238	Vis bePOD 3A canulée lg 28 mm
264 239	Vis bePOD 3A canulée lg 30 mm



VIS PERCUTANÉE Ø2,5	
RÉF.	DÉSIGNATION
264 241	Vis bePOD percutanée canulée lg 10 mm
264 242	Vis bePOD percutanée canulée lg 12 mm
264 243	Vis bePOD percutanée canulée lg 14 mm
264 244	Vis bePOD percutanée canulée lg 16 mm
264 245	Vis bePOD percutanée canulée lg 18 mm
264 246	Vis bePOD percutanée canulée lg 20 mm
264 247	Vis bePOD percutanée canulée lg 22 mm
264 248	Vis bePOD percutanée canulée lg 24 mm
264 249	Vis bePOD percutanée canulée lg 26 mm
264 250	Vis bePOD percutanée canulée lg 28 mm
264 251	Vis bePOD percutanée canulée lg 30 mm



VIS 3A Ø3	
RÉF.	DÉSIGNATION
256 427	Vis bePOD 3A canulée lg 10 mm
256 428	Vis bePOD 3A canulée lg 12 mm
256 429	Vis bePOD 3A canulée lg 14 mm
256 430	Vis bePOD 3A canulée lg 16 mm
256 431	Vis bePOD 3A canulée lg 18 mm
256 432	Vis bePOD 3A canulée lg 20 mm
256 433	Vis bePOD 3A canulée lg 22 mm
256 434	Vis bePOD 3A canulée lg 24 mm
256 435	Vis bePOD 3A canulée lg 26 mm
256 436	Vis bePOD 3A canulée lg 28 mm
256 437	Vis bePOD 3A canulée lg 30 mm
256 438	Vis bePOD 3A canulée lg 32 mm
256 439	Vis bePOD 3A canulée lg 34 mm



VIS PERCUTANÉE Ø3	
RÉF.	DÉSIGNATION
256 454	Vis bePOD percutanée canulée lg 10 mm
256 455	Vis bePOD percutanée canulée lg 12 mm
256 456	Vis bePOD percutanée canulée lg 14 mm
256 457	Vis bePOD percutanée canulée lg 16 mm
256 458	Vis bePOD percutanée canulée lg 18 mm
256 459	Vis bePOD percutanée canulée lg 20 mm
256 460	Vis bePOD percutanée canulée lg 22 mm
256 461	Vis bePOD percutanée canulée lg 24 mm
256 462	Vis bePOD percutanée canulée lg 26 mm
256 463	Vis bePOD percutanée canulée lg 28 mm
256 464	Vis bePOD percutanée canulée lg 30 mm
256 465	Vis bePOD percutanée canulée lg 32 mm

**Date de modification document :** mai 2024 - **Fabricant :** FH Industrie - **Gamme :** Pied - bePOD - **Nom du produit :** Vis bePOD - **Destinataire :** professionnels de santé - **N° du marquage CE :** 0459 - **Classe du DM :** IIb - **Indications :** ostéosynthèse du pied - DM pris en charge dans le cadre d'un GHS - **Recommandations d'utilisation :** il est fortement conseillé de lire l'étiquette et la notice d'instructions du produit.



DISTRIBUTEURS  
DISTRIBUTORS



FABRICANT  
MANUFACTURER

GROUPE  
**FH ORTHO**

**FR, FH ORTHO SAS**  
3 rue de la Forêt - Zone Industrielle  
BP 50009  
68990 Heimsbrunn CEDEX - FRANCE  
Tél. +33 (0)3 89 81 90 92  
Fax : +33 (0)3 89 81 80 11  
info@fortho.com  
www.fortho.com

**USA, FH ORTHOPEDICS INC.**  
OrthoEx  
7327 E Tierra Buena Lane  
Scottsdale, Arizona 85260 - USA  
Phone: +1 (412) 965-0950  
customerservice@fortho-us.com  
www.fortho.com

**PL, FH ORTHO POLSKA**  
Ul. Garbary 95/A6,  
61-757 Poznan - POLSKA  
Phone: +48 61 863 81 27  
Fax: +48 61 863 81 28  
biuro@implants24.pl  
www.fortho.com

**FR, FH INDUSTRIE**  
6 rue Nobel, Z.I. de Kernevez  
29000 QUIMPER - FRANCE  
Tél. +33 (0)2 98 55 68 95  
Fax : +33 (0)2 98 53 42 13  
contact-fhi@fortho.com  
www.fortho.com